





Spitze flachlegen!

Legen Sie die Spitze des Gerätes mit mässigen Druck flach auf den zu untersuchenden Bereich der Haut.

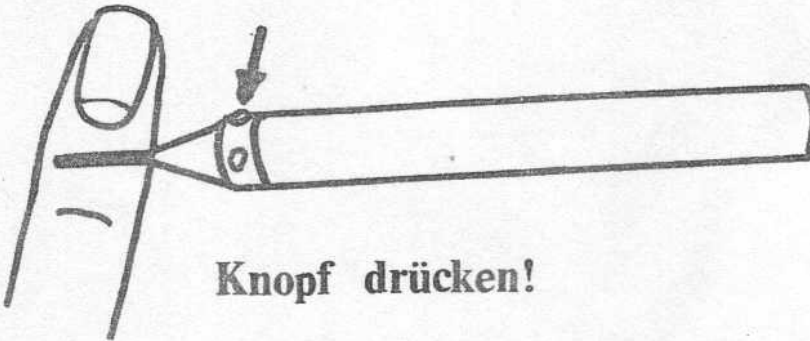


Knopf drücken!

Drücken Sie für ca 1 Sekunde den Kleinen Knopf.

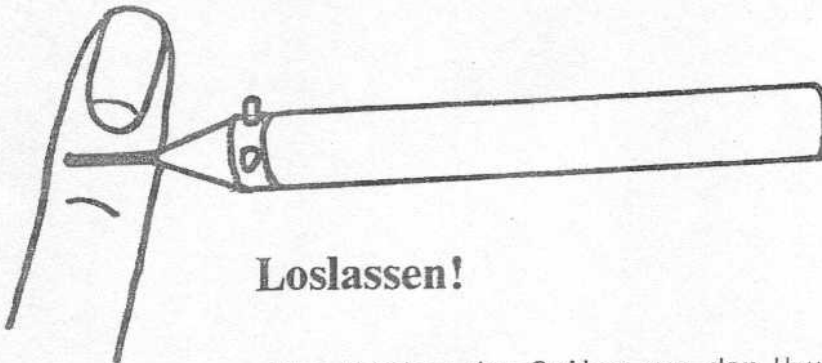

Loslassen!

Vor Abheben der Spitze von der Haut immer z u e r s t den Knopf loslassen.

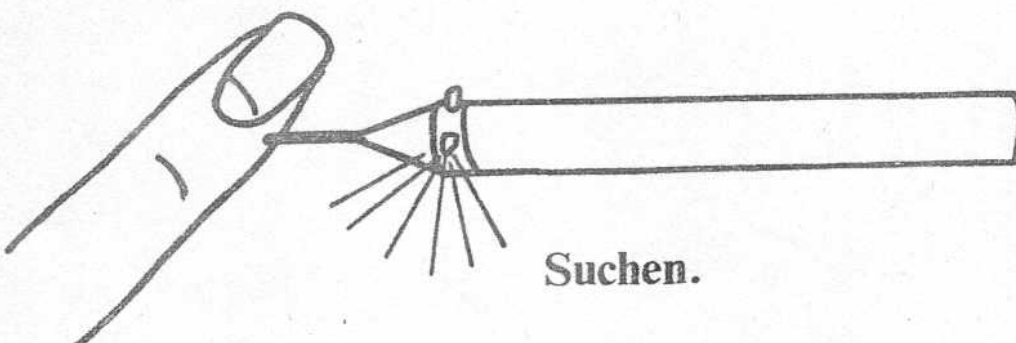

Suchen.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR NEURALSTIFT S V E S A 1070

Dieser Neuralstift dient zum Auffinden der Akupunkturpunkte und der Narbenstörfelder.

Der wesentlich Unterscheid zum bewährten NEURALSTAB SVESA 1025 besteht in der automatischen Anpassung an die Hautbeschaffenheit (Feuchtigkeit) des Patienten. Eine Gegenelektrode ist wie beim Neuralstab nicht nötig, der Mess-Stromkreis wird durch Berühren des Patienten mit der freien Hand des Arztes hergestellt.

EINSTELLUNG:

Legen Sie die Spitze des Gerätes mit mässigem Druck flach auf den zu untersuchenden Bereich der Haut. Sodann drücken Sie für ca. 1 Sekunde den kleinen Knopf neben der roten Leuchtdiode. Vor Abheben der Spitze von der Haut immer z u e r s t den Knopf loslassen. Nur so ist die richtige Einstellung gewährleistet und die richtige Empfindlichkeit für den betreffenden Hautbezirk für einen Zeitraum von etwa 30 Minuten eingestellt. Sie können nun mit der Punktsuche beginnen.

In Bezirken mit anderer Respiration muß die Einstellung der Automatik - wie oben - erneut durchgeführt werden.

NEURALTHERAPIE: Die Bestimmung der Narbenstörfelder erfolgt nach dem selben Prinzip. Die Spitze des Neuralstiftes wird flach auf die Narbe gelegt und der Automatikknopf eine Sekunde lang gedrückt. Damit ist die Empfindlichkeit für das betreffende Narbengebiet eingestellt. Durch Aufleuchten der roten Leuchtdiode beim Abtasten der Narbe wird ein Narbenstörfeld angezeigt.

AURICULOTHERAPIE: Durch flaches Auflegen der Spitze auf den Lobulus und gleichzeitiges Drücken des Automatikknopfes wird der Neuralstift hierfür eingestellt. Mit dieser Einstellung können alle pathologischen Punkte festgestellt werden (sowohl chronische als auch akute). Die AutomatikEinstellung n u r zur Suche der a k u t e n Punkte erfolgt auf dem Nullpunkt (dieser bildet das geometrische Zentrum der Ohrmuschel und liegt auf dem aufsteigenden Ast der Helix-Wurzel dort, wo diese aus der Concha heraustritt. Er ist durch eine - oft sehr tiefe - Kerbe gekennzeichnet und kann leicht mit dem Zeigefinger ertastet werden).

BATTERIEWECHSEL: Durch Drehen der geriffelten Kappe am Ende des Neuralstiftes kann man diese lösen und abheben. In jedem guten Foto- oder Radiogeschäft erhalten Sie passende Ersatzbatterien, Typ LADY 1,5 V. Achten Sie bitte beim Einsetzen der Batterien darauf, daß die kappenartige Erhebung der Batterie (+) die Verschlusskappe berühren muß.

WICHTIGER HINWEIS: Die höchste Empfindlichkeit des Neuralstiftes wird durch Drücken des Automatik-Knopfes ohne Berührung mit der Haut (also mit der Spitze in der Luft) eingestellt. In dieser Stellung wird die rote Leuchtdiode bei jeder Berührung der Haut aufleuchten, ebenso in der unmittelbaren Nähe jeder Stromleitung (Brummspannung). Beachten Sie diesen Hinweis, da sonst unnötiger B a t t e r i e v e r b r a u c h.